




## **SORBSAN**

- Sorbsan - kalciumalginátové krytí
- Sorbsan Silver - kalciumalginátové krytí se stříbrem
- Sorbsan Plus Carbon - kalciumalginátové krytí s aktivním uhlím

## **TRUFOAM**

- absorpční hydrofilní pěna  
pokrytá tenkou mikroporézní pěnovou vrstvou

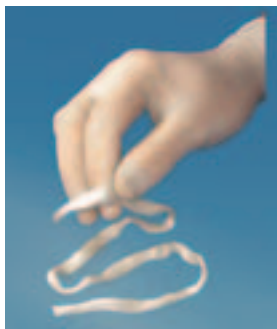

## Sorbsan Flat, Ribbon a Packing

Sorbsan je silně absorpční krytí se strukturou netkaného textilu vyrobené z vláken kalcium alginátu. V kontaktu s exsudátem vlákna Sorbsanu nabývají na objemu a mění strukturu na měkký amorfní gel tvořený sodium a kalciumalginátem. Tento neadherentní gel zajišťuje vlhké prostředí v ráně, podporuje autolytický debridement a podporuje hojení rány.

Sorbsan je vhodný pro:

- plošné, mělké rány nebo kavity
- středně silně secernující rány
- infikované rány (pravidelně kontrolované)



### Charakteristika:

- rychlé a snadné použití bez potřeby upravovat velikost krytí
- měkký gel vytvořený z vláken Sorbsanu absorbujících exsudát vyplní jakýkoliv tvar rány
- krytí absorbuje přítomné bakterie
- netkaná struktura krytí zajišťuje minimální maceraci okolí rány - nedochází k laterální distribuci exsudátu
- nabídka dvou velikostí pro kavity - Ribbon pro malé a Packing pro velké
- Sorbsan se rychle rozpouští v roztoku chloridu sodného, a proto ho lze bezbolestně odstranit z kavit nebo opláchnout z povrchu rány bez ulpělých vláken.
- Studie vlivu Sorbsanu na růst bakteriálních patogenů in-vitro ukazuje na signifikantní pokles populace *Staphylococcus aureus* ( $P < 0.001$ ) bez přírůstku u populace *Pseudomonas*, *Streptococcus pyogenes* nebo *Bakteroides fragilis*.

## Plastové vyšetřovací měřítko Sorbsan:

- každé balení Sorbsan Ribbon a Packing je doplněno plastovým vyšetřovacím měřítkem pro měření velikosti a tvaru rány (pomoc při monitorování hojení)
- měřítko má centimetrovou stupnici pro přesné měření hloubky rány
- pokud je otvor kavity menší než průměr měřítka, je potřeba změnit pracovní postup



Katalogové číslo	Kód VZP	Způsob úhrady	Název	ks/bal	ks/box
Sorbsan	1400	0081873	Z Sorbsan Flat 5x5cm	10	100
	1410	0081874	Z Sorbsan Flat 10x10cm	10	50
	1415		Sorbsan Flat 10x20cm	5	20
	1411	0081875	D Sorbsan Packing 30cm/2g	5	20
	1412	0081876	D Sorbsan Ribbon 40cm/1g	5	20
Příslušenství	1424		Kovové měřítko	1	100
	1425		Sorbsan plastové měřítko	1	100

Z - plná úhrada, poukaz podléhá schválení revizním lékařem

D - úhrada 75 % ceny, poukaz nepodléhá schválení revizním lékařem

## SORBSAN PLUS „2 v 1“ Kalcium alginát a absorpční sekundární krytí

Sorbsan Plus se skládá z kontaktní vrstvy kalciumalginátu (Sorbsan) a sekundární absorpční vrstvy, která absorbuje přebytek exsudátu a zvyšuje absorpční kapacitu krytí. Sorbsan Plus jako „2 v 1“ je jedním z nejvíce absorbujících krytí vůbec.



### Charakteristika:

- Sorbsan Plus jako „2 v 1“ nevyžaduje sekundární krytí
- delší doba použití - jedno z nejvíce absorbujících krytí vůbec
- aplikace rychle a jednoduše - v nabídce nelepící a lepící varianta

Sorbsan Plus nabízíme ve variantě nelepící (NA) a lepící (SA)




Sorbsan Plus NA



Sorbsan Plus SA

Sorbsan Plus NA - modrá vnější vrstva určuje horní stranu krytí při aplikaci na ránu. Toto neadhezivní krytí je vhodné pro pacienty s alergií na lepidla nebo s křehkou kůží.


Sorbsan Plus SA - toto samolepící krytí má tenkou, mikroporézní, pěnovou, vnější membránu, která redukuje riziko infekce a umožňuje pacientovi se sprchovat s krytím na ráně. Přesahující okraje ohraničují a chrání krytí, což je užitečné pro mobilnější pacienty.

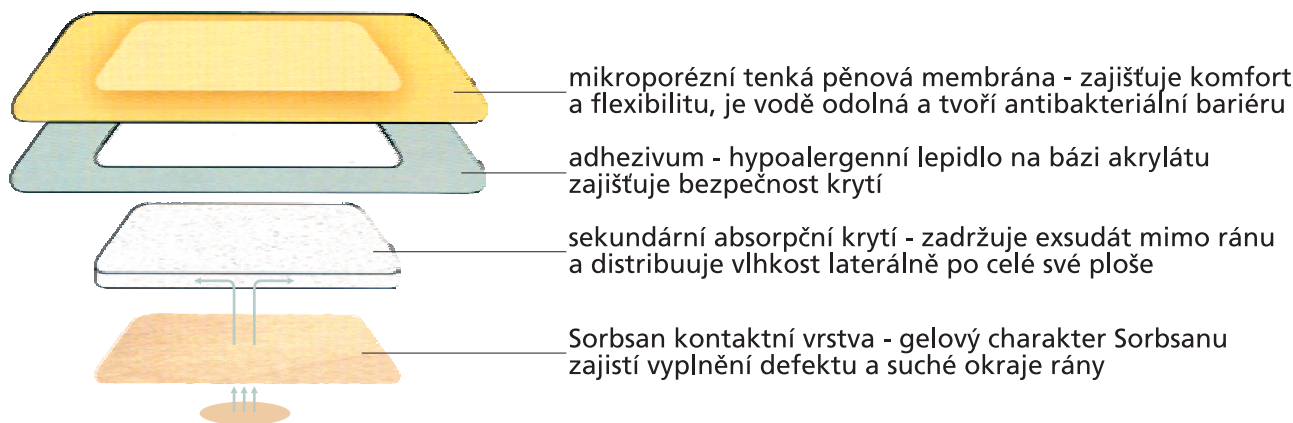


Sorbsan Plus je vhodný pro:

- plošné nebo mělké rány
- středně silně až silně secernující
- infikované rány (pravidelně kontrolované)
- jako sekundární krytí pro Sorbsan Flat nebo Ribbon/Packing

Porovnání absorpční kapacity:

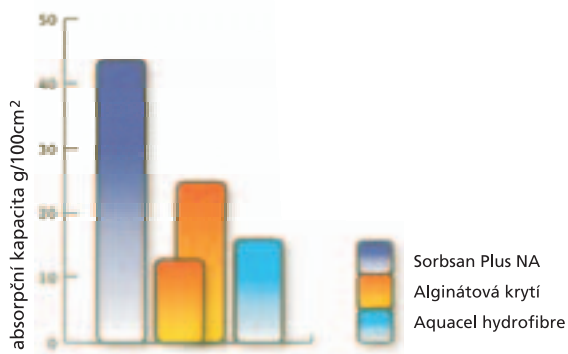

Porovnání zpracování tekutiny:

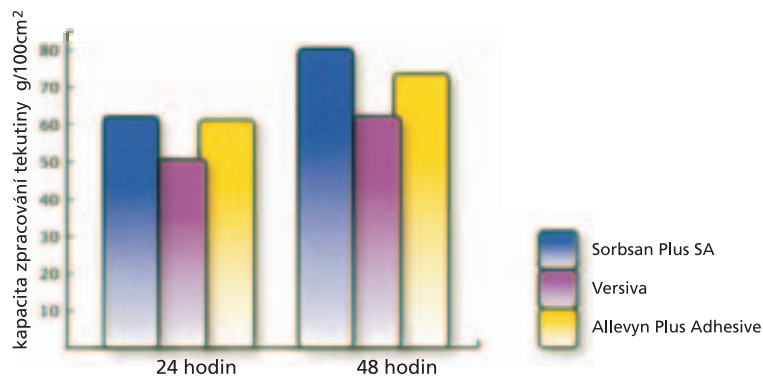

	Katalogové číslo	Kód VZP	Způsob úhrady	Název	ks/bal	ks/box
Sorbsan Plus NA	1420	0081877	Z	Sorbsan Plus NA 7.5x10cm	5	50
	1421	0081878	Z	Sorbsan Plus NA 10x15cm	5	20
	1422			Sorbsan Plus NA 10x20cm	5	20
	1423			Sorbsan Plus NA 15x20cm	5	20
Sorbsan Plus SA	1420SA	0081879	Z	Sorbsan Plus SA 11.5x14cm (7.5x10cm aktivní plocha)	10	100
	1421SA	0081880	Z	Sorbsan Plus SA 14x19cm (10x15cm aktivní plocha)	10	100
	1422SA			Sorbsan Plus SA 14x24cm (10x20cm aktivní plocha)	5	50
	1423SA			Sorbsan Plus SA 19x24cm (15x20cm aktivní plocha)	5	50

Z - plná úhrada, poukaz podléhá schválení revizním lékařem

## SORBSAN PLUS CARBON - Sorbsan s přidavkem aktivního uhlí

Kalcium alginátové a sekundární absorpční krytí se zápach absorbujícím aktivním uhlím

- Sorbsan Plus Carbon se skládá z kontaktní vrstvy kalciumalginátu (Sorbsan) a sekundární absorpční vrstvy, absorbující přebytek exsudátu
- přítomnost aktivního uhlí zajišťuje eliminaci zápachu exsudátu v ráně
- modrá vnější vrstva určuje horní stranu krytí při aplikaci na ránu



Vhodné pro:

- plošné nebo mělké rány
- silně secernující rány
- infikované rány (pravidelně kontrolované)

Charakteristika:

- multifunkční krytí absorbuje zápach a kontroluje množství exsudátu
- Sorbsan Plus Carbon jako „2 v 1“ nevyžaduje sekundární krytí
- delší doba použití - jedno z nejvíce absorbujících krytí vůbec
- aplikace rychle a jednoduše - v nabídce nelepící varianta

	Katalogové číslo	Kód VZP	Způsob úhrady	Název	ks/bal	ks/box
Sorbsan Carbon Plus	1420C	0081881	Z	Sorbsan Carbon Plus 7,5x10cm	5	50
	1421C	0081882	Z	Sorbsan Carbon Plus 10x15cm	5	20
	1422C			Sorbsan Carbon Plus 10x20cm	5	20
	1423C			Sorbsan Carbon Plus 15x20cm	5	20

Z - plná úhrada, poukaz podléhá schválení revizním lékařem

# SORBSAN SILVER - Sorbsan s přidavkem stříbra




Sorbsan Silver je poslední inovací doplněnou do široké nabídky krytí Sorbsan

## Charakteristika:

- obsahuje 1,5% účinného stříbra - vytváří optimální podmínky pro hojení infikovaných, středně až silně secernujících ran
- aktivní stříbro je pevně vázáno ve struktuře alginátu, nekontaminuje ránu a postupně účinkuje po celou dobu aplikace krytí
- cenově dostupné alginátové krytí se stříbrem
- nabízíme standardní provedení Flat, Ribbon a Packing a také provedení s extra absorpční vrstvou Sorbsan Silver Plus v nelepící (NA) i lepící (SA) variantě.
- nabízíme nejširší výběr krytí se stříbrem.

## Antibakteriální účinek:

Nezávislé laboratorní testování potvrdilo efektivní antibakteriální účinek Sorbsanu Silver na řadu běžných patogenů:

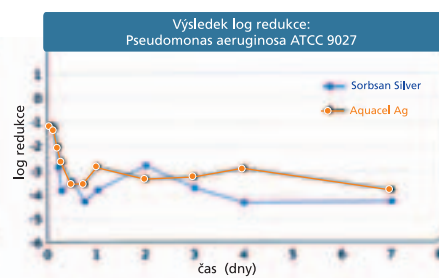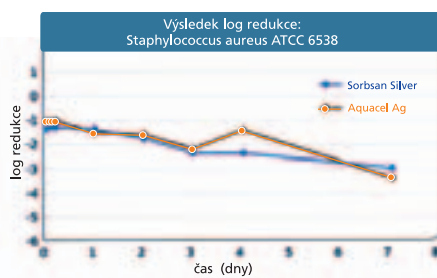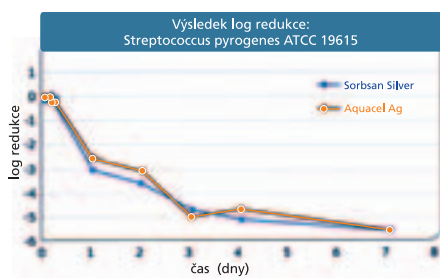

Katalogové číslo	Kód VZP	Způsob úhrady	Název	ks/bal	ks/box
Sorbsan Silver	Ag1400	0081865	Z Sorbsan Silver Flat 5x5cm	10	100
	Ag1410	0081866	Z Sorbsan Silver Flat 10x10cm	10	50
	Ag1415		Sorbsan Silver Flat 10x20cm	5	20
			Sorbsan Silver Packing		
	Ag1411	0081867	D 30cm/2g	5	20
	Ag1412	0081868	D Sorbsan Silver Ribbon 40cm/1g	5	20
Sorbsan Silver Plus NA	Ag1420	0081869	Z Sorbsan Silver Plus NA 7.5x10cm		
	Ag1421	0081870	Z Sorbsan Silver Plus NA 10x15cm		
	Ag1422		Sorbsan Silver Plus NA 10x20cm		
	Ag1423		Sorbsan Silver Plus NA 15x20cm		
Sorbsan Silver Plus SA	Ag1420SA	0081871	Z Sorbsan Silver Plus SA 11.5x14cm (7.5x10cm aktivní plocha)		
	Ag1421SA	0081872	Z Sorbsan Silver Plus SA 14x19cm (10x15cm aktivní plocha)		
	Ag1422SA		Sorbsan Silver Plus SA 14x24cm (10x20cm aktivní plocha)		
	Ag1423SA		Sorbsan Silver Plus SA 19x24cm (15x20cm aktivní plocha)		

Z - plná úhrada, poukaz podléhá schválení revizním lékařem

D - úhrada 75 % ceny, poukaz nepodléhá schválení revizním lékařem

# TRUFOAM

Trufoam je absorpční hydrofilní pěna pokrytá tenkou mikroporézní pěnovou vrstvou.

V nabídce je nelepící NA a lepicí SA varianta.

Trufoam umožňuje prostup kyslíku do rány, zajišťuje vlhké prostředí v ráně a odvod přebytečného exsudátu. Tím je zajištěn autolytický debridement a hojení rány.




Vhodné pro:

- plošné nebo mělké rány
- středně silně secernující rány
- infikované rány (pravidelně kontrolované)

Charakteristika:

- aplikace rychle a jednoduše
- pěna se rozpíná absorpcí exsudátu a vyplňuje tvar rány
- nelepící Trufoam NA minimalizuje bolest při převazu
- excelentní schopnost zpracování tekutiny - doba použití až 7 dní
- jednoduché odstraňování z křehké kůže pomocí vody/fyziol. roztoku

Trufoam SA:

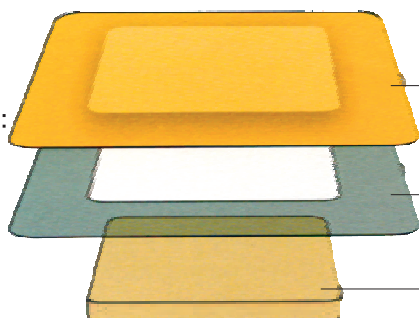

mikroporézní tenká pěnová membrána - zajišťuje komfort a flexibilitu, je vodě odolná a tvoří antibakteriální bariéru

adhezivum - hypoalergenní lepidlo na bázi akrylátu zajišťuje bezpečnost krytí

hydrofilní pěna - vysoce absorpční nelepící pěna vyplňuje mělké kavity v ráně

	Katalogové číslo	Kód VZP	Způsob úhrady	Název	ks/bal	ks/box
Trufoam NA	2231	0081883	Z	Trufoam NA 5x5cm	10	100
	2233	0081884	Z	Trufoam NA 10x10cm	10	100
	2235			Trufoam NA 15x15cm	5	50
Trufoam SA	2242	0081885	Z	Trufoam SA 7x9cm (3x5 cm aktivní plocha)	10	100
	2243	0081886	Z	Trufoam SA 11x11cm (7x7cm aktivní plocha)	10	100
	2244	0081887	Z	Trufoam SA 15x15 (11x11cm aktivní plocha)	5	50
	2246	0081888	Z	Trufoam SA 15x20 (11x15cm aktivní plocha)	5	50

Z - plná úhrada, poukaz podléhá schválení revizním lékařem